

Gültig von 01.11.2024 - 19.12.2024

## Personenwaage mit Medizinzulassung

Ergonomisch optimierte Bauform, robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld



# KERN®



Zweitanzzeige an der Waagenrückseite, dadurch bequem vom Patienten und dem Arzt oder Pflegepersonal ablesbar



Bequem zu transportieren dank der beiden integrierten Transportrollen

- Medizinzulassung
- Eichklasse III (Eichung optional)
- Praktische Zweitanzzeige an der Waagenrückseite, dadurch bequem vom Patienten und dem medizinischen Personal ablesbar
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
- Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
- Wägebereich bis 250 kg (Ablesbarkeit 0,1 kg)


**Hold-Funktion:** Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen.

**Mutter-Kind-Funktion:** Das durch Wägung ermittelte Gewicht des Elternteils wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend wird das Elternteil gemeinsam mit dem Kind gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt. Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm des Elternteils gewogen werden können.

**BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht**  
**Feinanzeige:** durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden.

- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
- Bequem zu transportieren dank der beiden integrierten Transportrollen
- Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Artikelnr.	Inhalt	Listenpreis	Aktion
6.263 895	MPE 250K100 PM	615,00	450,00 €*

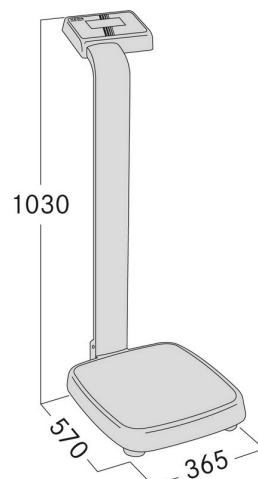

## Stuhlwaage MCC 250K100M

Ergonomisch optimierte Stuhlwaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm



Zwei umklappbare Armlehnen und Fußstützen erleichtern das Platznehmen. Ideal für übergewichtige Patienten oder zum barrierefreien Umsetzen z. B. vom Bett auf die Stuhlwaage



Fahrbare Ausführung mit zwei lenkbaren Rollen und besonders komfortablen Feststellbremsen hinten



Netzadapter extern, serienmäßig, mit Zugentlastung und Trennstecker zur Schonung der Stromversorgungsbauteile

Diese Stuhlwaage ist das ideale Messinstrument für die Altenpflege und Paramedizin, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 250 kg.

- Medizinzulassung
- Eichklasse III (Eichung optional)
- Fahrbare Ausführung, zwei lenkbaren Rollen und besonders komfortablen Feststellbremsen hinten
- Ergonomisch angeordnete Handgriffe

Durch ihre vier Räder gewährleistet diese Stuhlwaage ein Höchstmaß an Mobilität im Verbringen zum Patienten. Dadurch wird eine höhere Zeiteffizienz des Klinikpersonals sowie eine verbesserte Sicherheit der Patienten erreicht, die in ihrem gewohnten Umfeld gewogen werden können.

**Hold-Funktion:** Bei unruhig sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen

**BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht**  
**Feinanzeige:** durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden  
**Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten**

- Bequemes Überwinden von Türschwellen, Kanten und Spalten von Personenaufzügen
- Extra breite, bequeme, ergonomisch optimierte Sitzschale einen sicheren Halt während der Wiegung
- Sitzfläche, Fuß- und Armauflagen in deutlich kontrastierendem Schwarz, dadurch ideal für Demenzpatienten geeignet

Artikelnr.	Inhalt	Listenpreis	Aktion
6.258 072	MCC 250K100M	<del>1350,00</del>	<b>999,00 €*</b>



**Rouven Gauweiler**

Tel. 0621 87690-26  
Mobil: 0170 7745615  
gauweiler@buddeberg.de

**Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr erfahren?  
Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir sind für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage!**